


rollz®

Rollz Motion Rhythm

DE - Leitfaden des Moduls und der App

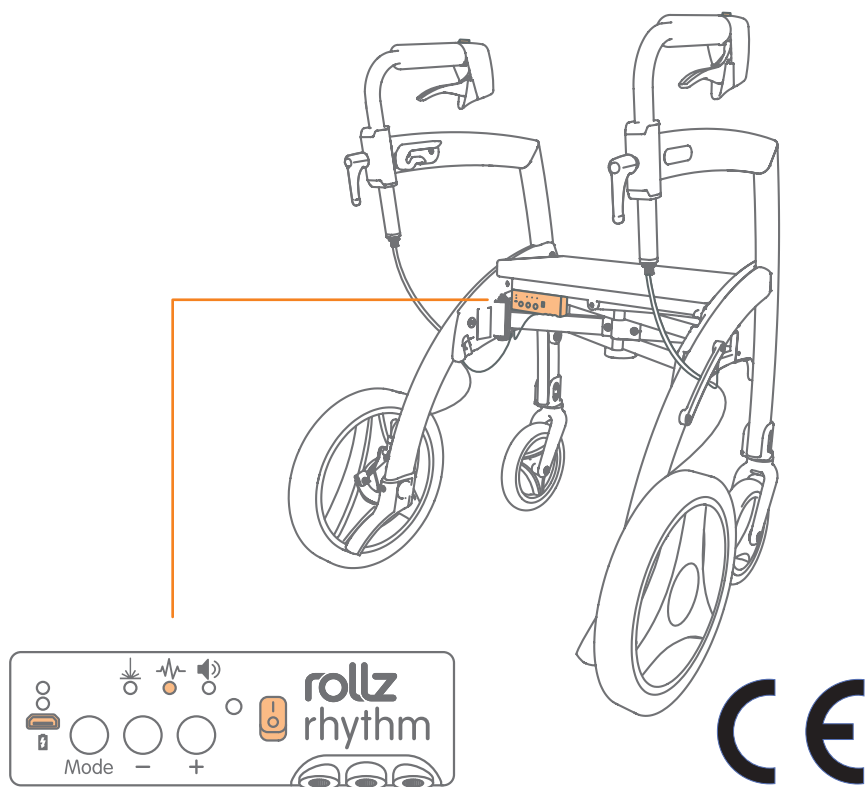

LEITFADEN DES MODULS UND DER APP

rollz motion rhythm

DE

Die neueste Version dieses Handbuchs ist online unter www.rollz.com oder unter Einstellungen in der Rollz-App verfügbar.

ZWECKBESTIMMUNG

Der Rollz Motion Rhythm ist ein Rollator, der speziell für Personen mit neurologischen Erkrankungen, wie Parkinson, entwickelt wurde. Anpassbare Signale, auditive, visuelle und taktile, können einzeln oder in Kombination verwendet werden, um den Nutzern zu helfen, ein gleichmäßiges Gangbild aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen.

BEVOR SIE ANFANGEN

Diese Erklärung ist eine Ergänzung zu der Bedienungsanleitung, des Rollz Motion Rollators.

Sie können das Rollz Rhythm-Modul auf zwei Arten einrichten und verwenden: über das Modul auf dem Rollator und/oder über die App.

ACHTUNG!

Der Rollz Motion Rhythm enthält elektronische Komponenten. Verhindern Sie daher, dass dieser Rollator durchnässt wird. Verwenden Sie ihn nicht im Freien bei starkem Regen. Verwenden Sie zum Laden des Moduls nur das mitgelieferte Mikro-USB-Ladegerät.

TECHNISCHE DATEN DES MODULS

Betriebstemperatur: -5°C bis +45°C


Nennspannung und -strom: 5V DC - 0,5A

Kapazität der Batterie: (1S2P) 5200mAh

Frequenz der drahtlosen Verbindung: 2,4 GHz - 2,5 GHz

AUFLADEN DES ROLLZ RHYTHM MODULS

Stellen Sie immer sicher, dass das Modul vor der Verwendung aufgeladen wird. Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Mikro-USB-Ladegerät. Der USB-Anschluss befindet sich auf der linken Seite des Moduls.

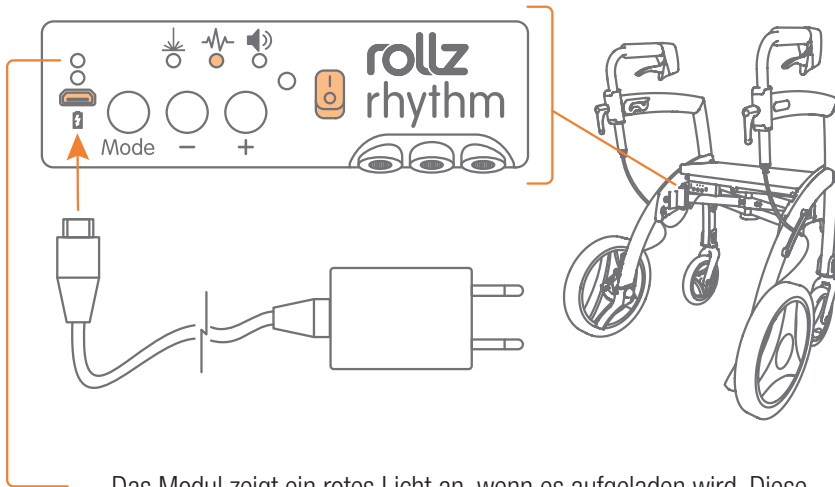

Das Modul zeigt ein rotes Licht an, wenn es aufgeladen wird. Diese Lampe wird grün, wenn es vollständig aufgeladen ist. Das Modul darf nur durch einen Adapter mit 5V oder 1A aufgeladen werden.

Der Batterieverbrauch hängt von der Verwendung des Moduls ab. Es kann zwischendurch immer wieder aufgeladen werden.

Achtung: Wenn die Batterie leer ist und das Gerät nicht mehr starten kann, laden Sie die Batterie mit dem beiliegenden Micro-USB-Kabel auf.



INSTALLIEREN DER ROLLZ APP

Die Rollz App kann kostenlos auf Ihr Smartphone oder Tablet, aus dem Play Store (für Android) oder dem App Store (für iOS), heruntergeladen werden. Suche nach "Rollz".




Rollz



BEDIENUNG DES MODULS AUF DEM ROLLATOR

Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Modul einzuschalten. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Modul vollständig in Betrieb ist.

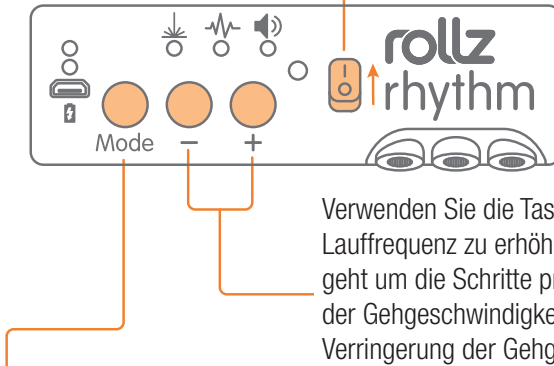

Verwenden Sie die Tasten "-" und "+", um die Lauffrequenz zu erhöhen oder zu verringern: Es geht um die Schritte pro Minute. Für eine Erhöhung der Gehgeschwindigkeit wählen Sie "+". Für eine Verringerung der Gehgeschwindigkeit wählen Sie "-".

Verwenden Sie die "Mode"-Taste, um durch die verschiedenen Hinweis-Optionen zu blättern. Die Leds zeigen an, welche Optionen ausgewählt wurden.




- | | | | |
|---|---|---|-------------------|
| ● | ● | ● | Alle Optionen |
| ● | ○ | ○ | Laser |
| ○ | ● | ○ | Vibration |
| ● | ● | ○ | Laser & Vibration |
| ○ | ○ | ● | Ton |
| ● | ○ | ● | Laser & Ton |
| ○ | ● | ● | Vibration & Ton |

Umfangreichere Einstellungen sind in der Rollz App verfügbar.

Halten Sie die Tasten "-" und "+" gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren: Alle Hinweis-Optionen aktiviert, durchschnittliche Intensität, 16 Wiederholungen und 66 Schritte pro Minute.

STARTEN DER HINWEISE BEIM GEHEN

Drücken Sie kurz die linke oder rechte Taste an den Griffen, um die eingestellten Hinweise zu starten. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um zu beenden.

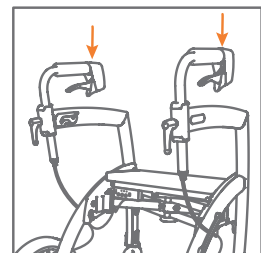

VERBINDUNG ZUM MODUL HERSTELLEN (mit der App)

Schalten Sie das Modul auf dem Rollator ein und öffnen Sie die Rollz App zum Herstellen einer Verbindung.




Das Modul kann über Bluetooth mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden werden. Wenn die App geöffnet wird, muss eine Reihe von Schritten durchlaufen werden, um eine Verbindung herzustellen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche
BLUETOOTH AKTIVIEREN

SCAN für Geräte

Wählen Sie das Gerät mit
dem Namen "RollzRhythm".

Klicken Sie auf
VERBINDEN

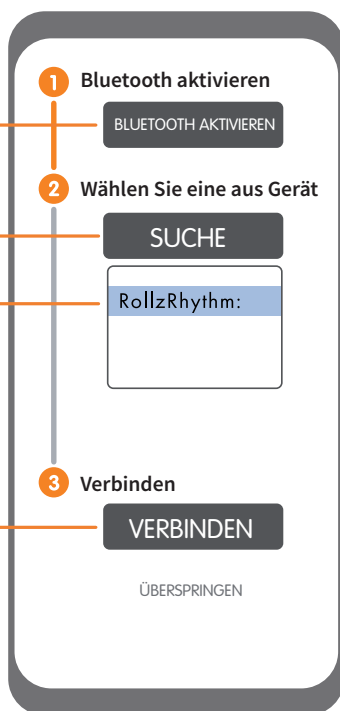

Wenn das Modul erfolgreich verbunden ist, sehen Sie in der oberen rechten Ecke der App ein "verbunden"-Symbol. Jetzt blinken auch die LEDs der aktivierten Hinweise auf dem Modul.



VERWENDUNG DER ROLLZ APP

Mit der App können Sie die gleichen und zusätzliche Optionen einstellen.

Klicken zum Aktivieren/Deaktivieren

1. Laser
2. Vibration
3. Ton
4. Vibration/Ton am Telefon

Klicken Sie, um Vibration und/oder Ton am Smartphone zu aktivieren oder zu deaktivieren

Einstellungen der Tonstärke

Legen Sie die Länge des Hinweis-Musters für 8, 16, 32 Schritte oder kontinuierliche Wiederholung fest.

Weiter unten, in der Rollz App, können Sie den gewünschten Rhythmus einstellen, indem Sie auf die Kästchen ankreuzen.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All	
	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Laser
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Vibration
	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Hoher Ton
	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Niedriger Ton

Wenn die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **SENDEN**. Das Rollz Rhythm Modul zeigt nun eine Vorschau des Musters und der eingestellten Werte an.

Hinweis: Änderungen an der App werden erst vorgenommen, wenn **SENDEN** angeklickt wird.

Klicken Sie auf “-” oder “+”, um die Lauffrequenz anzupassen. Die Änderung der Lauffrequenz wird in der Anzahl der Schritte pro Minute, am oberen Bildschirmrand, angezeigt. Drücken Sie nach jeder Anpassung erneut auf **SENDEN**.

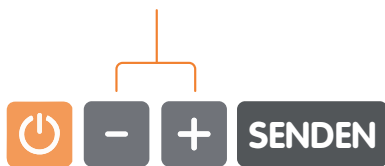

Das Modul kann auch ferngesteuert werden. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Muster zu starten. Drücken Sie erneut, um wieder zu stoppen.

Hinweis: Aktualisieren Sie die App, wenn eine neue Version verfügbar ist.

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE

Rollz International behandelt Ihre Privatsphäre mit Sorgfalt. Alle persönlichen Ihre Einstellungen werden auf dem Modul und auf Ihrem eigenen Smartphone oder Tablet gespeichert.

GARANTIE

Ihr Rollz Motion Rhythm Rollator wird durch die Garantiebedingungen im Rollz Motion Benutzerhandbuch abgedeckt. Die spezifischen Teile Ihres Rollz Motion Rhythm sind durch die folgenden Garantiezeiten abgedeckt:

1. Die Garantie für das Rollz Rhythm Modul beträgt 24 Monate.
2. Die Griffe des Rollz Motion Rhythm, mit der Vibration, haben eine Garantie von 12 Monaten.
3. Die Batterie im Rollz Motion Rhythm Modul hat eine Garantie von 12 Monaten.

ZUBEHÖR

Der Rollz Motion Rhythm wird als Rollator geliefert. Wenn Sie den Rollator unterwegs in einen Rollstuhl verwandeln möchten, können Sie das Rollstuhlpaket dafür erwerben. Alle Rollz Motion Zubehörteile passen auch zum Rollz Motion Rhythm.

TIPPS FÜR BENUTZER

Tipps für die optimale Nutzung Ihres Rollators finden Sie unter **www.rollz.de**.



Rollz® International BV

Rotterdamseweg 402M
2629 HH DELFT
The Netherlands

+31 (0)20 362 20 10

www.rollz.com

info@rollz.com



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational